



19英寸的100万像素显示器 支持DICOM Part 14 标准，可用于观看DSA、CT和MRI影像

全屏均匀稳定显示

数字均匀均衡（DUE）功能可帮助均衡屏幕不同部分的亮度和色度变化，以呈现更为平滑的影像。



没有DUE



有DUE

亮度长期稳定

当亮度保持在建议的 180 cd/m² (最大 350 cd/m²) 时，艺卓保证 10,000 小时的使用。由于显示器符合 DICOM Part 14，即使长期使用，它仍可以如实地再现医学影像，如 DSA、CT 和 MRI。



RadiForce® MX194

精确诊断

艺卓仔细测量并设置了每个灰阶，使显示器符合DICOM Part 14标准。此外，在启动或唤醒时，艺卓专利的漂移修正功能可快速稳定亮度水平，并补偿由环境温度和时间推移所引起的亮度波动，从而以稳定的亮度和灰度如实地再现医学影像。

简化DICOM Part 14校准

通过使用附带的RadiCS LE质量控制软件，简化DICOM Part 14校准流程。RadiCS LE校正显示器的亮度和灰度色调，从而一直保持图像的准确性和一致性。

高对比度清晰显示

MX194采用高对比度的VA面板，可以清晰地查看影像。深黑显示能力突出色彩对比，对于彩色影像的清晰还原具有重要意义。

平滑的色彩再现

显示器支持每个RGB颜色10位输入，可同时显示超过十亿种颜色，确保了3D色彩渲染和图像融合的精准再现。
10位显示需要配置10位的显卡和10位的浏览软件。

为不同用途选择适合的模式

通过CAL Switch功能，用户可为不同设备，如CR、CT和内窥镜系统等选择相应的影像观看模式。使用附带的RadiCS LE软件将模式设置为自动切换到最佳查看状态。

提高可操作性

艺卓产品的多功能底座可以倾斜和旋转，高度调节范围大，确保了所有用户使用显示器时的舒适性。

符合医疗标准

该显示器符合最严格的医疗、安全和EMC辐射标准。

5年质保


艺卓及其授权经销商提供5年有限质保。

规格

机身颜色	黑色
面板	类型 背光类型 尺寸 物理分辨率 显示尺寸（水平 x 垂直） 点距 显示颜色 可视角度（水平/垂直，典型） 亮度（典型） 对比度（典型） 响应时间（典型）
视频信号	输入端口 数字扫描频率（水平/垂直） 模拟扫描频率（水平/垂直） 同步格式
USB	功能 标准
功率	电源要求 最大功耗 标准功耗 节能模式
传感器	亮度稳定 数字均匀均衡器 预设模式 OSD语言
物理规格	净重 净重（不包括底座） 安装孔距（VESA 标准）
认证及标准（请联系艺卓集团公司或联强国际获取最新信息。）	CE (Medical Device Directive), EN60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1, CSA C22.2 No. 601-1, IEC60601-1, VCCI-B, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, RoHS, China RoHS, WEEE, CCC, EAC
FDA	510(k) Clearance for General Radiography *
附件	AC电源线，信号线 (DisplayPort - DisplayPort), USB 数据线 (3 m), Utility光盘 (RadiCS LE, PDF 安装手册), 使用说明
质保期	5年

* 不支持显示用于乳腺诊断的图像。

尺寸图 (单位: mm)

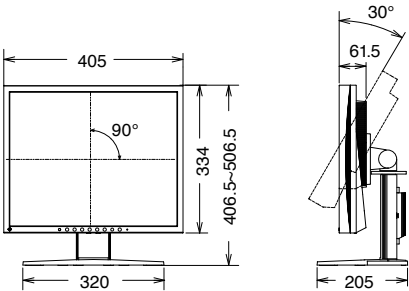

所有产品名称均为其各自公司的注册商标。
EIZO、EIZO 商标、RadiForce 是艺卓公司的注册商标。
DICOM 是美国国家电气制造商协会的注册商标，用于其与医疗信息数字通信相关的标准出版物。
规格如有变更，恕不另行通知。
版权所有 © 2019 艺卓公司。保留所有权利。

EIZO Corporation

艺卓中国官网 : www.eizo.com.cn
产品查询 : info@eizo.com.cn
技术支持 : tech@eizo.com.cn
销售及查询热线 : 400-819-8889

官方微信



官方微博



艺卓中国独家总代理:

联强國際 正品行货 信心承诺
www.synnex.com.cn